


АППЛИКАТОРЫ ДЛЯ LYMPHASTIM ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕКРЫВАЮЩИХСЯ КАМЕР

Секторы расположены внахлест, без интервалов для мягкой и более эффективной процедуры.

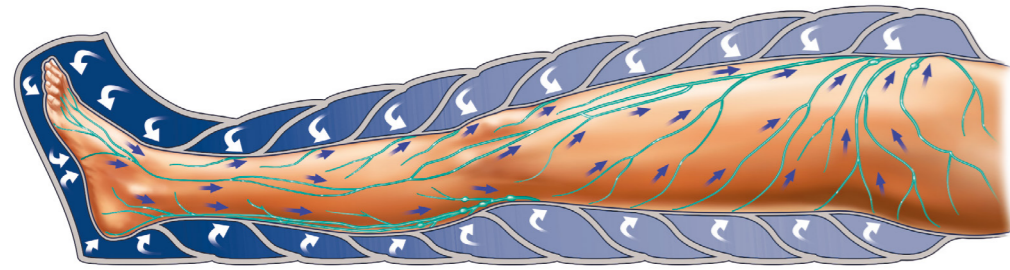

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА АППЛИКАТОРОВ ДЛЯ BTL-6000 LYMPHASTIM

- Эргономичный дизайн для максимального комфорта.
- Разъемы для легкой смены аппликатора в один клик.
- Автоматическая система высвобождения воздуха из аппликатора по окончании терапии для комфортного использования.
- Система автоматической идентификации аппликаторов: устройство автоматически распознает подключенный аппликатор и выбирает верное давление.

ШИРОКИЙ ВЫБОР АППЛИКАТОРОВ

АППЛИКАТОР БРЮКИ 24

Аппликатор брюки идеально подходит для всех типов телосложения благодаря большой площади покрытия застежки.



АППЛИКАТОР БРЮКИ 24 РАЗМЕР XL

Для очень больших пациентов.



АППЛИКАТОР БРЮКИ 24 НА МОЛНИИ

Полная длина, качественная молния для быстрого и легкого одевания/снятия



АППЛИКАТОР БРЮКИ 24 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Универсальный размер аппликатора был специально разработан для быстрого и легкого изменения размера брюк, что очень удобно для пациентов различной комплекции.



АППЛИКАТОР ДЛЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Выбор из трех размеров (S, M и L).



АППЛИКАТОР РУКАВ ДЛЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Аппликатор рукав уникален своей чрезвычайно эргономичной большой грудной камерой.



btl-ru@btlnet.com
www.btlmed.ru

Все права защищены. Несмотря на то, что были приняты все меры по предоставлению наиболее точной и своевременной информации, автор данного каталога не несет ответственности за какие-либо ошибки или опечатки, содержащиеся в нем. Приведенная в настоящем каталоге информация включает максимальные возможные технические характеристики аппаратов. Комплектация и характеристики приобретаемого Вами аппарата могут отличаться от параметров, описанных в настоящем каталоге. Товары и технические характеристики, указанные в данном каталоге, могут отличаться в зависимости от страны, в которой они продаются.



BTL-6000 LYMPHASTIM



BTL-6000 LYMPHASTIM

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ

Лимфодренаж - это клинически проверенный метод лечения, хорошо зарекомендовавший себя и дающий быстрые и видимые результаты.

BTL Lymphastim работает по принципу пневматической прессотерапии. Специальные аппликаторы, оснащенные несколькими камерами, обеспечивают мягкий массаж, который способствует естественной циркуляции лимфы по телу.

РАЗЛИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Реабилитация и спортивная медицина
- Клиники лимфологии и ревматологии
- Спа курорты, санатории, центры красоты и эстетической медицины


НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ

- Хронические отеки
- Послеоперационная обструкция лимфатических сосудов
- Ишемическая болезнь и венозная недостаточность

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ

- Целлюлит
- Уход после липосакции
- Синдром тяжелых ног

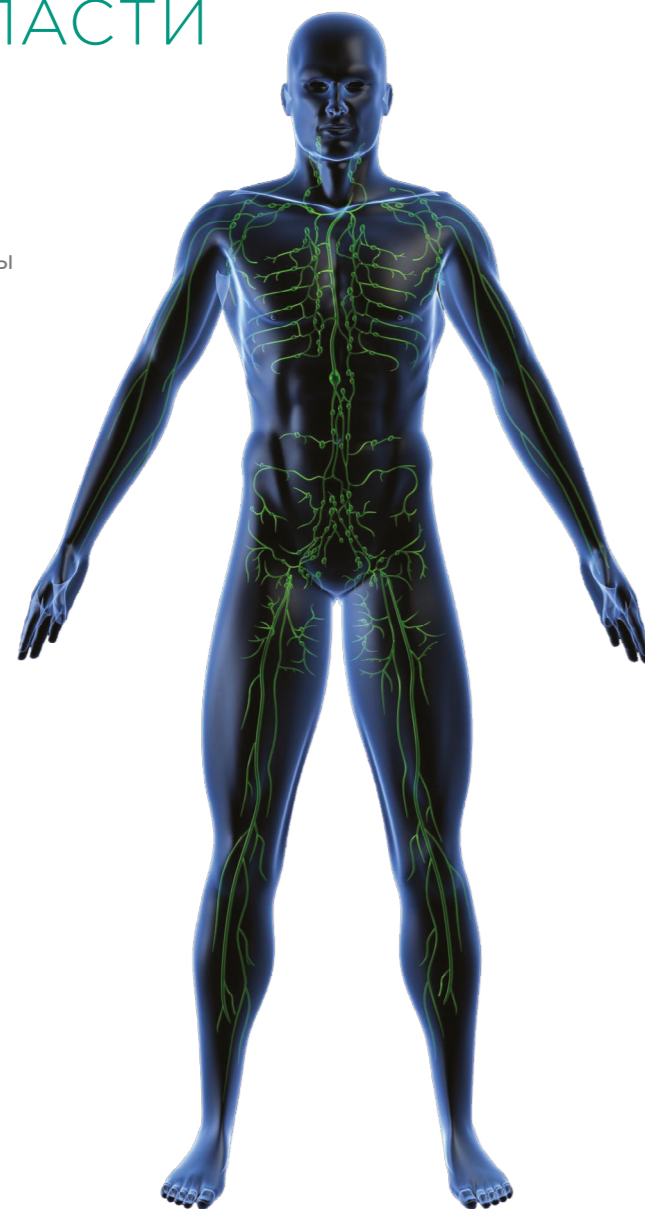

BTL-6000 LYMPHASTIM TOPLINE

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 12-КАНАЛЬНЫЙ АППАРАТ ПРЕССОТЕРАПИИ

- 15 программ различных методов сжатия
- Встроенная энциклопедия с рекомендациями по лечению
- Память на 500 пользовательских программ
- Расширенные установки для настройки терапии

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА BTL-6000 LYMPHASTIM TOPLINE

- 26 запрограммированных протоколов терапии и программ последовательностей
- Индивидуально регулируемое давление для каждой камеры
- Активная камера отображается на дисплее
- Возможность отключения одного или нескольких секторов, когда пациент не может терпеть давление.
- Расширенные настройки градиента давления

BTL-6000 LYMPHASTIM EASY

12-канальные/ 6-канальные ЭКОНОМИЧНАЯ МОДЕЛЬ С LED ЭКРАНОМ

- 8 предустановленных программ, которые могут быть изменены пользователем
- Основной градиент давления и программа настройки скорости наполнения
- Давление может быть изменено в течение процедуры
- Активная камера отображается на гистограмме



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ BTL-6000 LYMPHASTIM

МОДЕЛЬ	BTL-6000 LYMPHASTIM 12 TOPLINE	BTL-6000 LYMPHASTIM 12 EASY	BTL-6000 LYMPHASTIM 6 EASY
Номер заказа	P6000.003	P6000.002	P6000.001
Интерфейс пользователя	Цветной 5.7" сенсорный экран	LED экран	LED экран
Энциклопедия BTL	26 клинических протоколов (последовательностей)		
Программы пользователя	500 программ пользователя		
Запрограммированные протоколы	15	8	8
Число каналов	12	12	6
Параметры давления	20-160 мм рт. ст.	20-160 мм рт. ст.	20-160 мм рт. ст.
Градиент	Непрерывная настройка, 0-100 %	0, 10, 20, 30 %	0, 10, 20, 30 %
Размеры		320 x 190 x 280 мм	
Вес		7,5 кг	
Работа от сети		100-240 Вт, 50-60 Гц	
Стандартные аксессуары	Основной прибор 12 Topline, кабель питания	Основной прибор 12 Easy, кабель питания	Основной прибор 6 Easy, кабель питания

Опциональные аксессуары для Lymphastim 12 Easy / 12 Topline

Номер заказа P6000.060	Аппликатор брюки 24 сектора	Номер заказа P6000.075	Аппликатор для верхних конечностей 8 секторов - размер S
Номер заказа P6000.059	Аппликатор брюки 24 сектора на липучках		
Номер заказа P6000.071	Аппликатор брюки 24 сектора на липучках-размер XL	Номер заказа P6000.067	Аппликатор для нижних конечностей 10 секторов-размер L
Номер заказа P6000.072	Аппликатор брюки 24 сектора на молнии		
Номер заказа P6000.065	Аппликатор для верхних конечностей 8 секторов	Номер заказа P6000.066	Аппликатор для нижних конечностей 10 секторов-размер M

Опциональные аксессуары для Lymphastim 6 Easy

Номер заказа P6000.061	Аппликатор Брюки 12 секторов	Номер заказа P6000.063	Аппликатор для нижних конечностей 6 секторов - размер L
Номер заказа P6000.064	Аппликатор для верхних конечностей 6 секторов		
Номер заказа P6000.074	Аппликатор для верхних конечностей 6 секторов - размер S	Номер заказа P6000.062	Аппликатор для нижних конечностей 6 секторов - размер M
		Номер заказа P6000.077	Аппликатор для нижних конечностей 6 секторов - размер S

Опциональные аксессуары для всех аппаратов

Номер заказа P6000.034	Кабель-интерфейс для 2-х аппликаторов для конечностей	Номер заказа P6000.073	Полоса расширяющая для аппликатора брюки 24 сектора на молнии
Номер заказа P6000.070	Полоса расширяющая для аппликатора брюки 24, 12	Номер заказа BTL-13.026	BTL-1300 Lymphatic кушетка для проведения лимфодренажа
Номер заказа P6000.069	Полоса расширяющая для аппликатора нижних конечностей - размер L		
Номер заказа P6000.068	Полоса расширяющая для аппликатора нижних конечностей - размер S,M	Номер заказа T013.025	BTL-1300 Lymphatic Basic кушетка для проведения лимфодренажа
Номер заказа P5002.009	Тележка		
Номер заказа P6000.211	Пластиковая тележка		

