


УРОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ

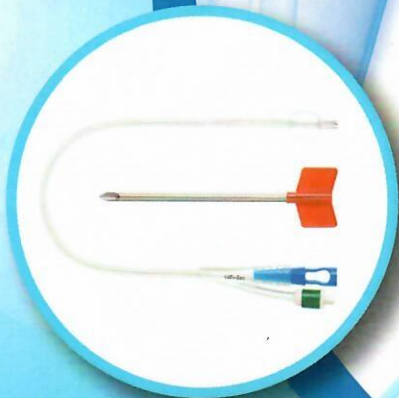

Катетеры Фолея являются наиболее часто применяемыми катетерами в урологии. Эти катетеры характеризуются наличием баллона, расположенного на дистальном кончике катетера и предназначенного для удержания катетера в мочевом пузыре. Баллончик катетера Фолея емкостью от 30 мл также может быть использован для остановки кровотечения при удалении аденомы простаты. В двухходовом катетере Фолея один канал используется для отведения мочи, другой – для наполнения баллона. Для осуществления постоянной ирригации мочевого пузыря после трансуретральной резекции простаты и выраженной гематурии применяют трехходовые катетеры Фолея.

Катетеры, как правило, изготавливаются из силикона, пластика (медицинский ПВХ) или латекса. Силиконовые катетеры чаще всего используются для длительной катетеризации, катетеры из ПВХ и латекса – для краткосрочной.

Силикон – один из самых распространенных и широко используемых материалов в производстве высококачественных урологических катетеров.

Высококачественный силикон катетеров **INWAY®** делает процесс катетеризации легким и комфортным, а тип стерильной упаковки позволяет ее легко вскрывать даже в перчатках. Сами катетеры и их наконечники рентгеноконтрастные.

Полностью силиконовые катетеры **INWAY®** обладают очень низким аллергенным потенциалом и сохраняют естественный вид кожных покровов в месте установки катетера на весь срок катетеризации.

Большой внутренний просвет катетеров и низкий риск отложения солей обеспечивают высокий уровень дренажа даже при длительной установке катетера. Прозрачный силикон, из которого изготовлены катетеры, позволяет легко контролировать процесс дренажа и уровень мочи.

Компания **PFM Medical** вот уже более 40 лет улучшает качество жизни людей с деликатными проблемами. Тесно сотрудничая как с врачами, так и с пациентами, специалисты компании удовлетворяют все индивидуальные потребности пациентов, обеспечивают надежность, комфорт и помогают вести привычный образ жизни.

Компания **PFM Medical** производит:

- Уретральные катетеры;
- Надлобковые мочевые катетеры;
- Наборы для цистостомии (установки надлобкового катетера);
- Наборы для замены надлобкового катетера.

Трансуретральные урологические катетеры

INWAY® Катетер Фолея



Особенности


- Кончик катетера с двумя дренажными отверстиями напротив друг друга;
- Рентгеноконтрастный катетер и наконечник;
- Не содержит латекса.

Все катетеры **INWAY®** предназначены для длительного дренирования мочевого пузыря. Полностью изготовлены из высококачественного прозрачного силикона.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Каталожный номер	Размер по CH	Цветовая кодировка	Длина, см	Объем баллона, мл	Кол-во штук в упаковке
1111230	12	●	42	5 - 10	10
1111430	14	●	42	30	10
1111630	16	●	42	30	10
1111830	18	●	42	30	10
11112030	20	●	42	30	10
11112230	22	●	42	30	10
11112430	24	●	42	30	10

INWAY® Катетер Фолея Комфорт

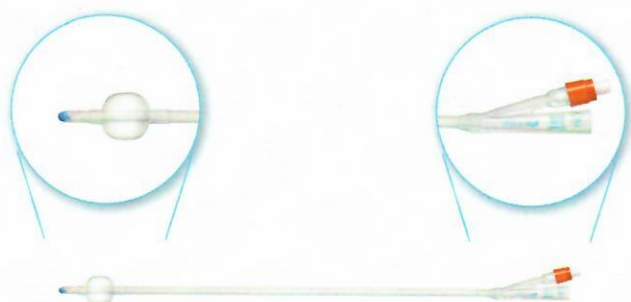

Особенности


- Кончик катетера с двумя дренажными отверстиями напротив друг друга;
- Рентгеноконтрастный катетер и наконечник;
- Не содержит латекса.

Катетеры предназначены прежде всего для длительной катетеризации и благодаря особой марке силикона придают особый комфорт для пациентов. Полностью изготовлены из высококачественного прозрачного силикона, который не вызывает местных реакций и не провоцирует отложение солей в просвете катетера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Каталожный номер	Размер по CH	Цветовая кодировка	Длина, см	Объем баллона, мл	Кол-во штук в упаковке
11201410	14	●	42	5 - 10	10
11201610	16	●	42	5 - 10	10
11201810	18	●	42	5 - 10	10
11202010	20	●	42	5 - 10	10

INWAY® Катетер Фолея, тип Тимана

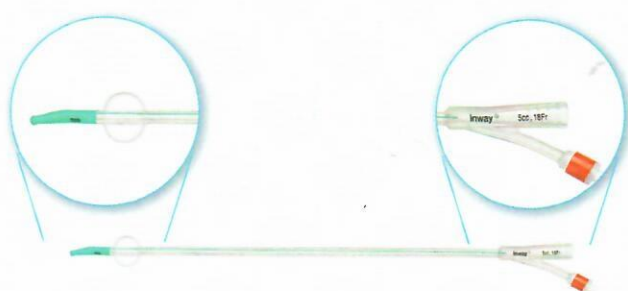

Особенности


- Рентгеноконтрастный катетер и наконечник;
- Не содержит латекса.

Кончик катетера имеет специальный изгиб на дистальном конце, что обеспечивает более эффективный процесс катетеризации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Каталожный номер	Размер по CH	Цветовая кодировка	Длина, см	Объем баллона, мл	Кол-во штук в упаковке
11121430	14	●	40	5	10
11121630	16	●	40	5	10
11121830	18	●	40	5	10

INWAY® 3-ходовой катетер Фолея с наконечником типа Couvelaire

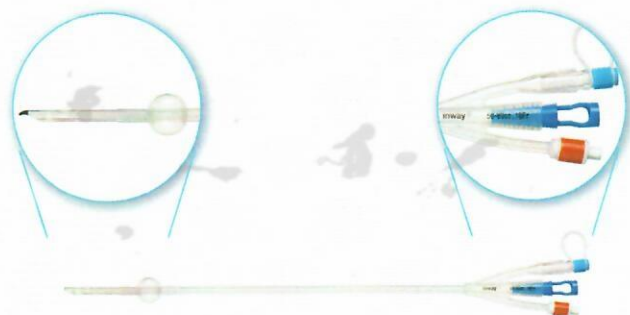

Особенности


- Рентгеноконтрастный катетер и наконечник;
- Не содержит латекса.

Силиконовый катетер INWAY® 3-ходовой катетер Фолея, с наконечником типа Couvelaire применяется для орошения мочевого пузыря и в качестве постоянного катетера для дренажа мочевого пузыря.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Каталожный номер	Размер по СН	Цветовая кодировка	Длина, см	Объем баллона, мл	Кол-во штук в упаковке
11171880	18	●	40	80 - 100	10
11172080	20	●	40	80 - 100	10
11172280	22	●	40	80 - 100	10
11172480	24	●	40	80 - 100	10

Надлобковые мочевые катетеры INWAY®

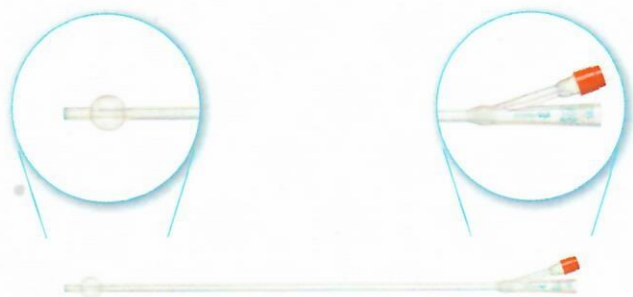

Особенности


- Открытый кончик катетера для дренажа;
- Не содержит латекса;
- Объем баллона - 5 мл.

Катетеры предназначены для длительной катетеризации. Полностью изготовлены из высококачественного силикона, который не вызывает местных реакций и не провоцирует отложений солей в просвете катетера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Каталожный номер	Размер по СН	Цветовая кодировка	Длина, см	Объем баллона, мл	Кол-во штук в упаковке
12101205	12	○	42	5	10
12101405	14	●	42	5 -10	10
12101605	16	●	42	5 -10	10
12101805	18	●	42	5 -10	10
12102005	20	●	42	5 -10	10
12102205	22	●	42	5 -10	10

INWAY® надлобковый катетер с набором для установки

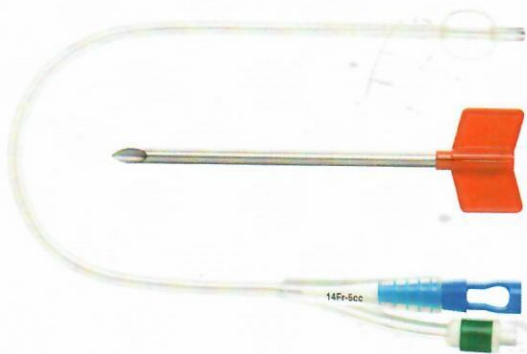


Полный набор для установки надлобкового катетера:

- Силиконовый надлобковый катетер;
- Расцепляемая канюля;
- Заглушка для закрытия катетера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Каталожный номер	Размер по СН	Длина, см	Кол-во штук в упаковке
12301205	12	40	1
12301405	14	40	1

INWAY® набор для замены надлобкового катетера

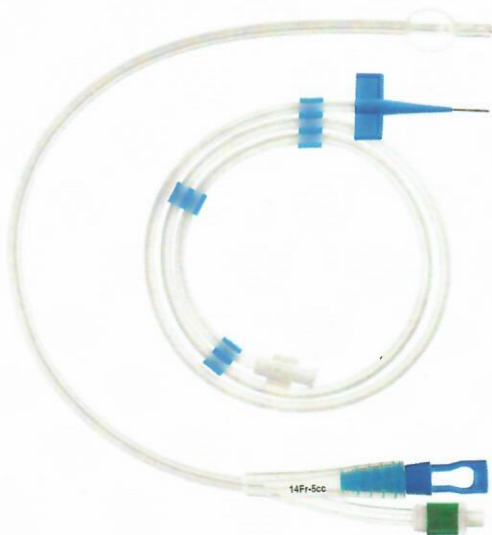

Набор включает все компоненты для замены надлобкового катетера:

- Силиконовый надлобковый катетер;
- Проводник (0,038 дюйма);
- Заглушка для закрытия катетера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Каталожный номер	Размер по СН	Длина, см	Кол-во штук в упаковке
12201405	14	40	1
12201605	16	40	1



Дистрибьютор: ООО «Фармлайн»

Тел./факс: +7 495 2340704

E-mail: office@pharmline.ru

www.pharmline.ru

pfmmedical

Quality and Experience

Производитель: pfm medical mepro gmbh

Am Söterberg 4

66620 Nonnweiler-Otzenhausen, Germany

www.pfmmedical.com