

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

WWW.ZERTS.RU

## ZERTS Multifunction®

для диагностики, терапии и хирургии  
различных ЛОР-заболеваний



- ✓ ЛОР-установка ZERTS Multifunction® - наиболее полный и универсальный набор современного оборудования для эффективного оснащения кабинета ЛОР врача в компактном корпусе
- ✓ Модульная система позволяет скомпоновать множество вариантов Комбайна. Функциональные модули и блоки соединяются между собой, образуя единый комплекс
- ✓ Мобильность комплекса ZERTS Multifunction® обеспечивает дополнительное удобство при работе с пациентом





**ZERTS**

Многофункциональный Комплекс  
ZERTS Multifunction®

## СЕРИЯ УСТАНОВОК КЛАССА **EXPERT**

универсальный набор оборудования для оснащения кабинета ЛОР врача с использованием эндоскопического оборудования, системы хранения данных и микроскопии

- Подключение к стационарной водопроводной системе/система автономного водоснабжения
- Возможность использования эндоскопов любого производителя
- Возможность интеграции микроскопа любого производителя
- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус с антимикробным покрытием
- Система промывания уха с автоматическим контролем  $t^{\circ}$  и системой фильтрации промывной воды
- Аспиратор жидкости
- Накопитель для секрета 2,5 л
- Система распыления медикаментов
- Система подогрева для 2 эндоскопов
- 2 емкости для антисептики эндоскопов
- Быстрый подогрев гортанных зеркал
- 2 галогеновых источника холодного света 150 Вт
- Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом (открывается при нажатии на фасад, комплектуется емкостью из нержавеющей стали)



**Expert plus**  
1100x590x1070 мм



**Expert**  
510x590x1070 мм





## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Система хранения данных исследований и результатов диагностики (моноблок с кронштейном, ПО для документирования клинической картины, принтер для печати результатов исследования)
- Дополнительная система подогрева инструментов в верхней консоли
- Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности
- Держатель/замок для гибкого эндоскопа
- Держатель налобной камеры
- Замок для видеокамеры эндоскопа
- Полка для дополнительного оборудования/клавиатуры
- Система автоопорожнения аспирационной емкости
- Портативная USB-видеокамера для эндоскопа
- Светодиодный источник холодного света для эндоскопа
- Микроскоп Carl Zeiss с системой интеграции в комплекс
- Медицинская мебель, идеально дополняющая оборудование в кабинете (оборудование и мебель от одного производителя)
- ЛОР-кресло пациента
- Стул врача



**Expert plus + hot**





**ZERTS**

Многофункциональный Комплекс  
ZERTS Multifunction®

## EXPERT ENERGY

Наиболее полный и универсальный набор оборудования в одном компактном корпусе с использованием эндоскопов, системы хранения данных, микроскопии и радиохирургии, без ящиков

- Подключение к стационарной водопроводной системе/система автономного водоснабжения
- Возможность использования эндоскопов любого производителя
- Возможность интеграции микроскопа любого производителя
- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус с антимикробным покрытием
- Система промывания уха с автоматическим контролем  $t^{\circ}$  и системой фильтрации промывной воды
- Аспиратор жидкости
- Накопитель для секрета 2,5 л
- Система распыления медикаментов
- Система подогрева для 2 эндоскопов
- 2 емкости для антисептики эндоскопов
- Быстрый подогрев гортанных зеркал
- 2 галогеновых источника холодного света 150 Вт
- Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом (открывается при нажатии на фасад, комплектуется емкостью из нержавеющей стали)
- Радиохирургический аппарат VM 780 Sutter (Германия)
- Аспиратор дыма с 3-ступенчатой системой очистки



**Expert Energy**





## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Система хранения данных исследований и результатов диагностики (моноблок с кронштейном, ПО для документирования клинической картины, принтер для печати результатов исследования)
- Дополнительная система подогрева инструментов в верхней консоли
- Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности
- Держатель/замок для гибкого эндоскопа
- Держатель налобной камеры
- Замок для видеокамеры эндоскопа
- Полка для дополнительного оборудования/клавиатуры
- Система автоопорожнения аспирационной емкости
- Портативная USB-видеокамера для эндоскопа
- Светодиодный источник холодного света для эндоскопа
- Микроскоп Carl Zeiss с системой интеграции в комплекс
- Медицинская мебель, идеально дополняющая оборудование в кабинете (оборудование и мебель от одного производителя)
- ЛОР-кресло пациента
- Стул врача



**Expert Energy + mobil**





**ZERTS**

Многофункциональный Комплекс  
ZERTS Multifunction®

## СЕРИЯ УСТАНОВОК КЛАССА **PROFY**

универсальный набор оборудования для оснащения кабинета ЛОР врача без использования эндоскопов

- Подключение к стационарной водопроводной системе/система автономного водоснабжения
- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус с антимикробным покрытием
- Система промывания уха с автоматическим контролем  $t^{\circ}$  и системой фильтрации промывной воды
- Аспиратор жидкости
- Накопитель для секрета 2,5 л
- Система распыления медикаментов
- Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом (открывается при нажатии на фасад, комплектуется емкостью из нержавеющей стали)



**Profy**  
510x590x1070 мм



**Profy plus**  
1100x590x1070 мм





## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Система хранения данных исследований и результатов диагностики (моноблок с кронштейном, ПО для документирования клинической картины, принтер для печати результатов исследования)
- Держатель/замок для гибкого эндоскопа
- Держатель налобной камеры
- Замок для видеокамеры эндоскопа
- Система автоопорожнения аспирационной емкости
- Медицинская мебель, идеально дополняющая оборудование в кабинете (оборудование и мебель от одного производителя)
- ЛОР-кресло пациента
- Стул врача



**Profy plus + hot (0°)**



**Profy plus + mobil (45°)**





**ZERTS**

Многофункциональный Комплекс  
ZERTS Multifunction®

## СЕРИЯ МОДУЛЕЙ **ENERGY** для радиохирургии

- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус с антимикробным покрытием
- Консоль с лотком и емкостями (склянки, банки с крышкой, стаканы)
- Радиохирургический аппарат VM 780 Sutter (Германия)
- Система аспирации дыма (3 ступенчатая очистка)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Верхняя консоль с металлической крышкой и лотками для инструментов
- Набор инструментов для радиоволновой хирургии
- Дополнительная система подогрева инструментов в верхней консоли
- Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности
- Дополнительная стыковочная рабочая поверхность
- Стабилизатор напряжения



**Energy**  
510x590x1070 мм



**Energy plus**  
1100x590x1070 мм





## **mobil** дополнительная система хранения

- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### **ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Металлический корпус 580x 590x1070 мм (10 стандартных цветов) с 4-мя эргономичными ящиками для хранения инструментов

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

- Верхняя консоль с металлической крышкой и лотками для инструментов
- Дополнительная стыковочная рабочая поверхность



## **hot** дополнительный блок для подогрева инструментов и утилизации

- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### **ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Металлический корпус 580x590x1070мм (10 стандартных цветов)
- Консоль с лотком и емкостями (склянки, банки с крышкой, стаканы)
- Ящик для хранения с подогревом инструментов
- Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом (открывается при нажатии на фасад, комплектуется емкостью из нержавеющей стали)

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

- Верхняя консоль с металлической крышкой и лотками для инструментов
- Дополнительная стыковочная рабочая поверхность
- Дополнительная система подогрева инструментов в верхней консоли
- Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности







## КРЕСЛО ПАЦИЕНТА

- Регулировка высоты и наклона спинной секции при помощи электроприводов LINAK (Дания)
- Поворот сиденья на 360 градусов
- Спинка кресла откидывается назад до горизонтального положения
- Эргономичные убирающиеся подлокотники
- Откидная подножка для размещения ног пациента
- Бесшовная обтяжка



## СТУЛ ВРАЧА

компактное и удобное рабочее кресло врача с возможностью регулировки высоты. Различные варианты комплектации, цвета

- Различные формы: со спинкой, без спинки, анатомическая форма
- Дополнительно табурет может оснащаться кольцом для опоры ног врача
- Для удобства позиционирования стул врача может поставляться в двух вариантах (с низким и высоким газ-патроном)
- Обивка - искусственная винилис-кожа SCADEN (Польша) устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению. Возможность заказа более 30 цветов обивки
- При обтяжке применяется бесшовная технология, что облегчает обработку дезинфицирующими средствами







## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ZERTS Multifunction®

### МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ

Многофункциональный Комплекс ZERTS Multifunction® представляет из себя модульную систему, которая обеспечивает возможность множества вариантов комплектации Комбайна.

Функциональные модули и блоки соединяются между собой специальной столешницей, образуя единый комплекс - ЛОР-Комбайн ZERTS Multifunction®

Составьте свой комплект модулей и блоков, мы соединим их в единый комплекс



Expert plus + hot (45°)



Expert plus + mobil (0°)



Expert plus + mobil (90°)




## СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ИСПОЛНЕНИЯ

международная цветовая палитра RAL K7 Original



5021

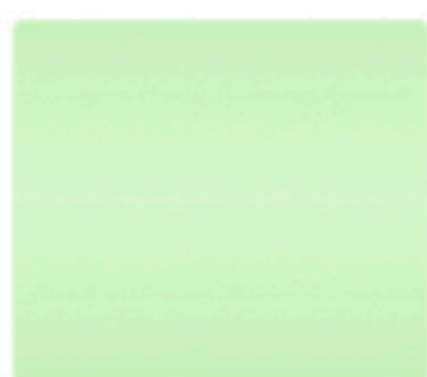

6019



5010



2011



7042




5024



2012



1001

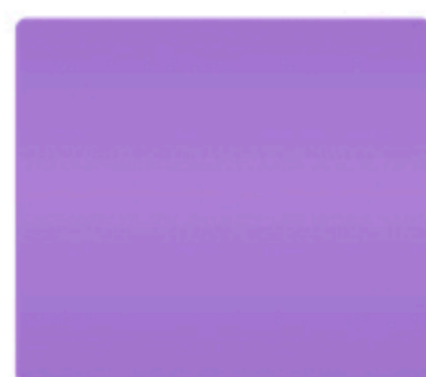

4005



6018

**МЫ ПРОИЗВОДИМ ОБОРУДОВАНИЕ  
НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА В РОССИИ**



**ZERTS**